

Silk'n FaceTite

Faltenreduktion & Hautstraffung

Hautverjüngung ohne chirurgische Eingriffe? Silk'n FaceTite macht's möglich!

Dieses Anti-Aging-Gerät strafft die Haut, reduziert feine Linien und regt die Bildung von Kollagen- und Elastinfasern an. Das Ergebnis ist eine frischer und jünger aussehende, strahlende Haut.

- Reduziert feine Linien
- Baut Volumen auf, strafft die Haut und liftet die Gesichtskonturen
- Regt die Bildung von Kollagen- und Elastinfasern an
- Festigt die tieferen Hautschichten und verbessert die Hautstruktur und -elastizität
- Reduziert oberflächliche Sonnen- und Altersflecken

Klinisch geprüft

Silk'n FaceTite verwendet HT™-Technologie (Home Tightening) zur Hautverjüngung. Im Gegensatz zu anderen Verjüngungsgeräten vereint FaceTite drei Energiequellen in einem Gerät für mehr Effizienz: Bipolare RF (Radiofrequenz)-Energie, LED-Lichtenergie und IR (Infrarot)-Wärmeenergie. Die Wirksamkeit dieser Kombination wurde in diversen klinischen Studien untersucht. Bei einer blinden, unabhängigen Bewertung vor und einen Monat nach 20 zweiwöchentlichen Behandlungen zeigten die Ergebnisse, dass 96 % der Teilnehmer sichtbar weniger Falten hatten, ohne nachteilige Nebenwirkungen.

Sicher

Silk'n FaceTite wurde eingehend getestet. Fazit ist, dass das Gerät sowohl von Frauen als auch von Männern sicher zu Hause verwendet werden kann. Es ist für fast alle Hauttypen und Hauttöne geeignet, auch für dunklere Hauttöne. Es kann sicher auf dem ganzen Gesicht und dem Hals angewendet werden, also auch für die Falten auf der Stirn (Runzelfalten), Krähenfüße und Falten unter den Augen (mit Ausnahme der Augenlider). Zudem gibt es keine Regenerationsphase, sie können also sofort danach Ihre täglichen Aktivitäten wieder aufnehmen. Auch Sonnenbaden ist kein Problem. Es wird jedoch empfohlen, die Haut mit einer Creme mit Lichtschutzfaktor einzucremen, da die Sonnenstrahlen die Haut altern lassen.

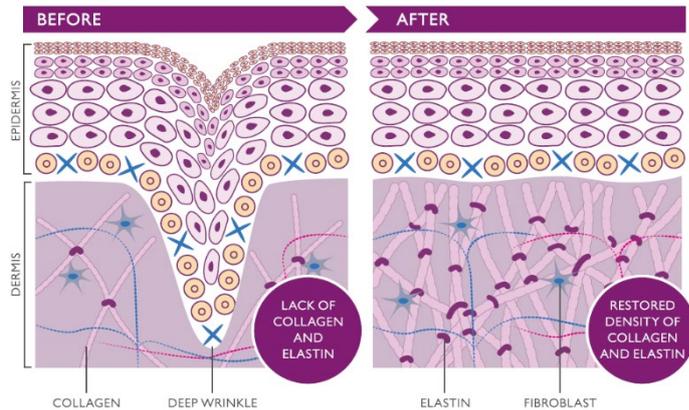


Abbildung 1: DAVOR: Kollagen- und Elastinfasern sind beschädigt und geschwächt.

Abbildung 2: DANACH: Kollagen- und Elastinfasern ziehen sich zusammen und die Haut erneuert sich von innen heraus.

Mit Silk'n FaceTite haben Sie im Handumdrehen eine straffere, glattere Haut!

Befolgen Sie diese einfachen Schritte.

Schritt 1: Bereiten Sie die Haut vor.

Sorgen Sie vor Beginn der Behandlung dafür, dass die Haut sauber und trocken ist. Entfernen Sie starkes Make-up und entfernen Sie mit einem Gesichtereiniger übrige Unreinheiten (wie Schmutz, Fett und Make-up-Rückstände). Spülen Sie die Haut gründlich mit Wasser ab und trocknen Sie sie mit einem sauberen, trockenen Handtuch ab.

Schritt 2: Beginnen Sie mit der Silk'n FaceTite-Behandlung.

Schließen Sie den Adapter an FaceTite an und schalten Sie das Gerät ein. Tragen Sie etwas Silk'n Slider Hyaluronic Gel auf die Behandlungsfläche des Geräts auf und beginnen Sie mit der Behandlung. Bei Bedarf können Sie während der Behandlung zusätzliches Gel auftragen. Um optimale Ergebnisse zu erzielen, empfehlen wir Ihnen, das Behandlungsschema zu befolgen, wie in der Gebrauchsanleitung angegeben.

Sie müssen FaceTite mit dem Gel verwenden, damit das Gerät gleiten kann. Ohne Gel funktioniert das Gerät nicht. Für regelmäßige Behandlungen empfehlen wir Slider Hyaluronic Gel. Wenn Sie jedoch sofort einen Anti-Aging-Effekt erzielen möchten, empfehlen wir, Silk'n Hyaluronic Serum zu verwenden. Das Serum ist über www.silkn.eu separat erhältlich.

Schritt 3: Reinigen und versorgen Sie die Haut.

Nach der Behandlung mit Silk'n FaceTite entfernen Sie die Reste des Gels mit einem Kosmetiktuch. Reinigen Sie die Haut gründlich mit lauwarmem Wasser und trocknen Sie sie mit einem sauberen, trockenen Handtuch ab. Abschließend tragen Sie ein Serum und/oder eine Tages-/Nachtcreme auf, um die Haut zu beruhigen und mit Feuchtigkeit zu versorgen.